


REVYLINE RL 700

Ирригатор для полости рта



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

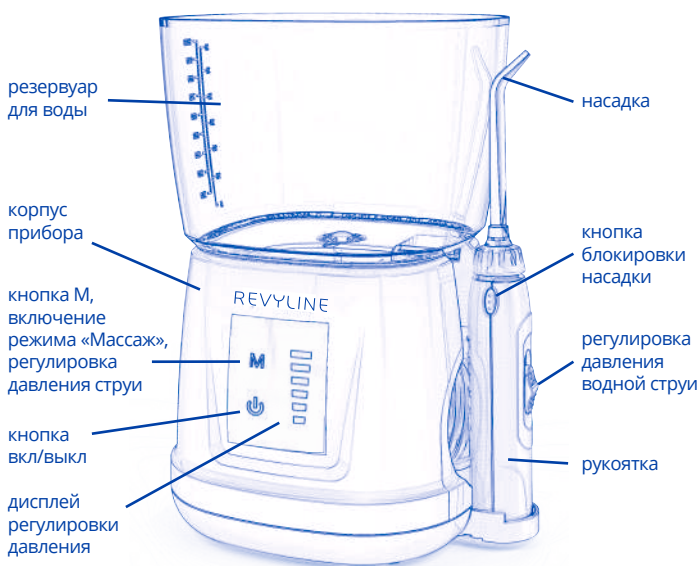

Вы стали обладателем уникального устройства, которое обеспечивает эффективную гигиеническую защиту полости рта. Ирригатор Revyline RL700 способен развить высокий уровень давления жидкости, позволяющий проводить глубокое очищение даже самых труднодоступных участков зубного ряда. Прибор оснащен объёмным резервуаром, который при необходимости используется как дорожный футляр. Применение современных технологий и использование новейших материалов легли в основу технической концепции продукции компании Revyline.


Меры предосторожности

Перед использованием ирригатора Revyline RL700 внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности. Это поможет вам максимально эффективно и комфортно использовать прибор.

1. Не берите штепсельную вилку влажными руками.
2. Не допускайте контакта корпуса прибора с водой или другими жидкостями.
3. Не используйте ирригатор во время принятия душа.
4. Если прибор упал в воду, не дотрагивайтесь до него и немедленно выдерните вилку из розетки.
5. Если прибор находился в условиях отрицательной температуры, перед эксплуатацией необходимо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 12 часов.
6. Перед каждым использованием прибора всегда проверяйте целостность кабеля питания.
7. Подключайте прибор только к электрической розетке, рассчитанной на соответствующую нагрузку.
8. Не направляйте струю воды под язык, в ухо, полость носа или другие уязвимые области. Мощная водная струя, генерируемая прибором, может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек на данных участках.
9. Используйте прибор в соответствии с инструкцией по применению и/или рекомендациями стоматолога.
10. Используйте дополнительные аксессуары и насадки только от ирригатора Revyline RL700.
11. Не вставляйте инородные предметы в разъемы и отверстия на корпусе прибора.
12. Не добавляйте в воду для ирригатора гранулированные вещества, например, соль. Они забивают насос и рукоятку ирригатора.
13. Храните блок питания прибора вдали от нагретых поверхностей.
14. Не используйте ополаскиватели для полости рта, содержащие в составе йод, масло, отбеливающие агенты.
15. Используйте для ирригации воду или раствор, рекомендованный стоматологом.
16. Не используйте при наличии открытых ран в полости рта или на языке.
17. Если вы находитесь в группе риска по состоянию здоровья и принимаете антибиотики перед проведением стоматологического лечения, перед применением ирригатора проконсультируйтесь со стоматологом.
18. Не снимайте пластиковый кончик с прозрачной насадки для очистки пародонтальных карманов. Если он потерялся, замените насадку на новую.
19. Не разрешайте детям играть с прибором.

Эксплуатация устройства

1. Вставьте блок питания в исправно работающую розетку.
2. Снимите резервуар с корпуса прибора, наполните его водой. Плотно закрепите резервуар на корпусе прибора (1).
3. Вставьте насадку в центральный разъем, расположенный в верхней части рукоятки (2). Маркировочное кольцо насадки должно быть на одном уровне с верхней границей рукоятки. Для того, чтобы достать насадку, нажмите и удерживайте кнопку блокировки насадки одновременно с извлечением ее из рукоятки (3).
4. Для выбора мощности напора водной струи используйте регулятор давления жидкости на ручке ирригатора (5) и кнопку М (6), расположенную на корпусе устройства.
5. Наклонитесь к раковине, введите насадку ирригатора в полость рта и расположите ее кончик напротив зуба. Во время ирригации продвигайте насадку вдоль линии десны, последовательно очищая каждый зуб.
6. После завершения использования прибора приведите регулятор давления жидкости в минимальный уровень, а затем нажмите сенсорную кнопку включения-выключения питания.

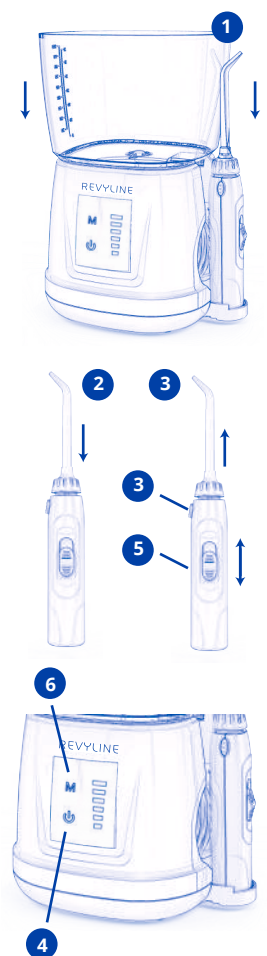

Режим ирригации

Расположите насадку в полости рта таким образом, чтобы поток струи был направлен под углом 45° к поверхности зуба. Чтобы вода не разбрызгивалась, неплотно сомкните губы. Во время ирригации вода естественным образом должна вытекать из полости рта в раковину. Для лучшего результата вначале очистите боковые зубы (моляры), а затем передние. Продвигайте кончик насадки вдоль линии десны, задерживая его между зубами. Продолжайте процедуру до тех пор, пока не очистите зубы изнутри и снаружи, а также все межзубные промежутки. Каждое последовательное нажатие на кнопку М увеличивает или уменьшает верхний уровень давления жидкости. Регулятором давления на ручке ирригатора можно изменять уровень давления от минимального до того уровня, который установлен кнопкой М. **Внимание!** Прибор начинает работать в режиме, который был установлен последним при предыдущем использовании, если он использовался более трех секунд.



Режим массажа

Модель RL700 оснащена специальной функцией массажа. Этот режим позволяет укреплять дёсны, стимулировать кровоснабжение тканей, активизировать обменные процессы. Для активации режима «Массаж» необходимо нажать и удерживать в течение трех секунд кнопку М, расположенную над кнопкой включения прибора (6). Для проведения массажа рекомендуется использовать стандартную сменную насадку.

После завершения ирригации

Выключите ирригатор. Извлеките блок питания из розетки. Ирригатор не предназначен для хранения в нем воды. После использования оставшуюся жидкость необходимо слить. В случае транспортировки прибора или его длительного хранения, резервуар необходимо снять и, перевернув, поместить на корпус ирригатора. В этом случае резервуар выполняет функцию футляра, предохраняя его от повреждений.

Использование ополаскивателей для полости рта и других растворов

Вы можете использовать для ирригации различные ополаскиватели для полости рта и антисептические растворы. Для подбора раствора проконсультируйтесь у стоматолога.

Внимание! В некоторых антисептических растворах могут содержаться нерастворимые частицы, которые при контакте с системой ирригатора могут повлиять на его работоспособность и уменьшить срок службы. После каждого использования специального раствора для ирригатора тщательно промойте систему. Наполните резервуар достаточным количеством воды, направьте насадку по направлению к раковине и включите устройство. Прогоните через систему ирригатора всю воду в резервуаре. При этом вымываются остатки растворов из ирригатора, предохраняя систему от засорения.

Очистка и уход

Перед очисткой ирригатора отсоедините блок питания от электрической розетки. При необходимости используйте для очистки мягкую ткань и мягкое неабразивное моющее средство. Не погружайте насадки в кипящую воду. Для их очистки используйте спирт. При регулярном использовании жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их ликвидации используйте специальное средство Revyline для очистки ирригатора, согласно инструкции по его применению.

Гарантия

Гарантия на прибор – 2 года. Техническое обслуживание ирригатора осуществляется в сервисном центре в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее сервис устройства производится за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

На расходные материалы и комплектующие. На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушением правил

эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки указанным в руководстве по эксплуатации.

На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания. На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками. На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей. На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

Насадки в комплекте

- Стандартные насадки для регулярного использования – 2 шт.
- Насадка с щетинками для очищения имплантатов, мостов
- Пародонтальная насадка для очищения десневых карманов
- Ортодонтическая насадка для ухода за брекетами и другими системами
- Насадка для очищения поверхности языка

Распространенные проблемы и их решение

- **Не извлекается насадка.**
Решение: Во время извлечения насадки нажмите и удерживайте кнопку блокировки насадки, расположенную на рукоятке прибора.
- **Вода не подается или подается под низким давлением.**
Решение: Надавите на резервуар для плотного соединения с корпусом прибора.
- **Сложности выбора уровня напора струи.**
Решение: После включения прибора выберите с помощью регулятора давления необходимый уровень мощности струи, который подбирается индивидуально. Для повышения эффективности ирригации используйте напор воды, не причиняющий вам дискомфорта. Комфортный напор жидкости можно подобрать регулировкой уровня давления жидкости.
- **Кровоточивость во время ирригации.**
Решение: Кровоточивость является характерным симптомом воспаления десен. Прежде всего необходимо уменьшить уровень давления струи. Ирригатор удаляет зубной налет и бактерии из десен. При дальнейшем использовании кровоточивость прекратится. При воспаленных и слабых деснах используйте пародонтальную насадку. Комфортный напор жидкости можно подобрать регулировкой уровня давления жидкости.
- **Как предотвратить разбрызгивание воды?**
Решение: Во время ирригации не стойте вертикально прямо с широко открытым ртом. Наклонитесь по направлению к раковине, приоткройте рот. Вода будет естественным образом выливаться из полости рта.

Руководство по устранению неполадок

Проблема	Возможная причина	Устранение
Мотор работает, но вода не подается	Резервуар для воды не плотно примыкает к корпусу прибора Пауза подачи воды вызвана положением регулятора давления на минимальном уровне	Извлеките резервуар для воды и повторно закрепите его на корпусе прибора Повысить уровень давления регулятором давления жидкости
Протечка между рукояткой и насадкой	Насадка не полностью вставлена	Извлеките насадку и повторно вставьте ее в разъем на рукоятке
Мотор не работает	Разъем шнура питания неплотно вставлен в соответствующий разъем, расположенный в нижней части прибора	Повторно вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем

Наименование прибора: ирригатор Revyline

Модель: RL 700
Уровень давления жидкости: 140 - 890 кПа;
Объем резервуара: 1000 мл;
Плавная регулировка уровня давления: да;
Функция массажа: да;
Питание: от сети переменного тока 100~240V/50~60 Гц;
Частота пульсации: 1200 в минуту;
Гарантия: 2 года;
Страна производитель: Китай.

Произведено по заказу ИП Обушенков М.А., г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 13, к. 1.
Сайт: www.revyline.ru. Тел.: 8(800)700-53-60.
Изготовлено: Yaoxin Electronic Technology (Shanghai) Co. Room 101, Tower 1, No. 1501, Jinsui Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China (Mainland).

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.

8 (800) 700-53-60

www.revyline.ru

Гарантийный талон

Название организации

Дата продажи

Место для печати